

МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



- Выровняйте и прикрепите батарею к основанию устройства - убедитесь, что она надёжно зафиксирована на месте.
- Включите устройство питания, переместив переключатель питания на нижней стороне батареи в положение ON, Выключите устройство, переведя переключатель питания в положение OFF.
- С выключателем питания в положении ON. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить устройство на первый уровень. Два раза для включения устройства. Повторное нажатие кнопки выключит устройство. Синий светодиод показывает соответствующий уровень мощности.
- При выключенном устройстве полностью вставьте аппликатор, нажав на него. Удалите, потянув его.
- Массажируйте желаемую часть тела с желаемой скоростью, при необходимости надавливая



- Выровняйте и прикрепите батарею к основанию устройства - убедитесь, что она надёжно зафиксирована на месте.
- Включите устройство питания, переместив переключатель питания на нижней стороне батареи в положение ON, Выключите устройство, переведя переключатель питания в положение OFF.
- С выключателем питания в положении ON. Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить устройство на первый уровень. Два раза для включения устройства. Повторное нажатие кнопки выключит устройство. Синий светодиод показывает соответствующий уровень мощности.
- При выключенном устройстве полностью вставьте аппликатор, нажав на него. Удалите, потянув его.
- Массажируйте желаемую часть тела с желаемой скоростью, при необходимости надавливая
- Чтобы извлечь аккумулятор, слегка нажмите кнопку отсоединения аккумулятора большим пальцем.


ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЗАРЯДКА

- Полностью зарядите аккумулятор до ШЕСТИ часов перед первым использованием, подключённым или отключённым от устройства.
- Для зарядки подключите прилагаемый адаптера 24 В к порту зарядки аккумулятора и подключите боковой кабель переменного тока в розетку.
- Светодиодная полоса на батарее / индикаторы мигают, показывая уровень заряда батареи, показывая активную зарядку
- С прикреплённой батареей, светодиодные индикаторы на устройстве мигают, показывая уровень заряда батареи и показывая активную зарядку.
- Полная зарядка отображается, когда все светодиоды перестают мигать и остаются полностью горящими.
- Аккумулятор можно заряжать в любое время и при любом уровне заряда.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ полностью разряжать аккумулятор до уровня красного светодиода.
- Среднее время работы составляет 2+ часа в зависимости от уровня скорости и давления, применяемого во время использования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Протрите устройство слегка влажным полотенцем, а затем вытрите насухо мягкой тканью.
- Для хранения или путешествий извлеките аккумулятор и храните в прилагаемой картонной коробке.

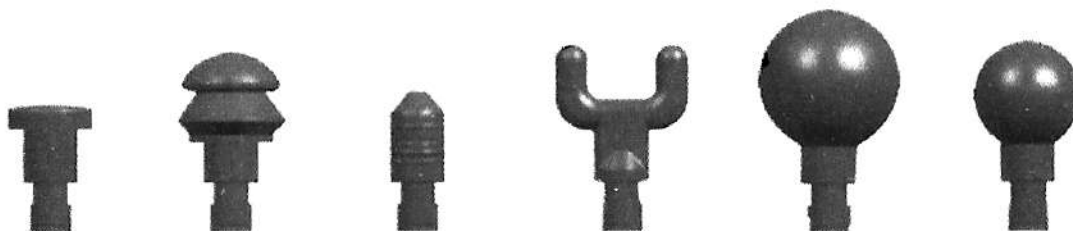

Плоская Башенная Пуля Вилка Шар Шар

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не погружайте в воду держите подальше от жидкостей или источников тепла, держите вентиляционные отверстия свободными от пыли и контроля скорости.
- Не вынимайте винты и не пытайтесь их разобрать.
- Не работайте непрерывно более одного часа. Дайте устройству отдохнуть в течение 30 минут перед повторным использованием.
- Отсоедините зарядное устройство от аккумулятора устройства после зарядки или перед использованием.
- Только для взрослых. Не используйте, если вы получили травму, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА, ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ:

- Только для взрослых.
- Используйте только на сухой чистой поверхности тела поверх одежды, слегка нажимая и перемещая по телу в течение 60 секунд.
- Используйте массажный пистолет только на мягких тканях тела, не вызывая боли или дискомфорта. Не используйте для массажа головы и любой другой костной области.
- Используйте аппликаторы, обеспечивающие наилучший желаемый эффект.
- Синяки могут возникать независимо от настроек контроля или давления, немедленно проверяйте и обработайте область. Остановитесь при первых признаках боли или дискомфорта.
- Держите пальцы, волосы или другие части тела подальше от стержня и задней части аппликатора, так как это может привести к защемлению.
- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия массажного пистолета.
- Не погружайте в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия массажного пистолета.
- Не роняйте и не используйте массажный пистолет не по назначению.
- Заряжайте только с помощью прилагаемого зарядного устройства для массажного пистолета 26 В постоянного тока.
- Внимательно осматривайте устройство и аккумулятор перед каждым использованием.
- Ни в коем случае не вмешивайтесь и не переделывайте массажный пистолет.
- Никогда не оставляйте работающий или заряжающий массажный пистолет без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЛИ ЛЮБЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Беременность. Диабет с такими осложнениями, как невропатия или повреждение сетчатки. Износ кардиостимулятора. Недавняя операция. Эпилепсия или мигрень. Грыжа межпозвоночных дисков. Спондилолиз. Недавние замены суставов или ВМС, металлические штифты или пластины или любые опасения по поводу вашего физического здоровья. Больные люди и дети должны сопровождаться взрослым при использовании любого вибрационного устройства. Эти противопоказания не означают, что вы не можете использовать устройство, но мы советуем перед применением проконсультироваться с врачом.

В настоящее время проводятся исследования влияния вибрационных упражнений на конкретные медицинские расстройства, что, вероятно, приведёт к сокращению списка противопоказаний, как показано выше. Практический опыт показал, что интеграция вибрационных в план лечения в ряде случаев носит рекомендательный характер. Это должно быть сделано по совету и в согласовании с врачом, специалистом или физиотерапевтом.

ГАРАНТИЯ

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА С МОМЕНТА ПОКУПКИ ЭТОТ ПРОДУКТ ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ ИЗ - ЗА ДЕФЕКТА МАТЕРИАЛА, УСТРОЙСТВО ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ БЕСПЛАТНО.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- 1) ущерб, причинённый несчастным случаем, злоупотреблением или неправильным обращением и транспортировкой;
- 2) при сдаче продукта для несанкционированного ремонта;
- 3) использование не в соответствии с инструкциями;
- 4) ущерб, превышающий стоимость продукта;
- 5) ухудшение качества поставляемого продукта в результате неправильных условий хранения;
- 6) непредставление датированного подтверждения покупки, чека.

Некоторые государства не допускают ограничения ущерба. Таким образом, вышеуказанное может не относиться к вам. Данная гарантия гарантирует определённые юридические права, но другие права могут регулироваться государством.